


# Руководство пользователя

ВИБРОМАССАЖЕР

Артикул: VM-MA36

Модель: LAZYCLOUD

СЕРИЯ (тип): VM

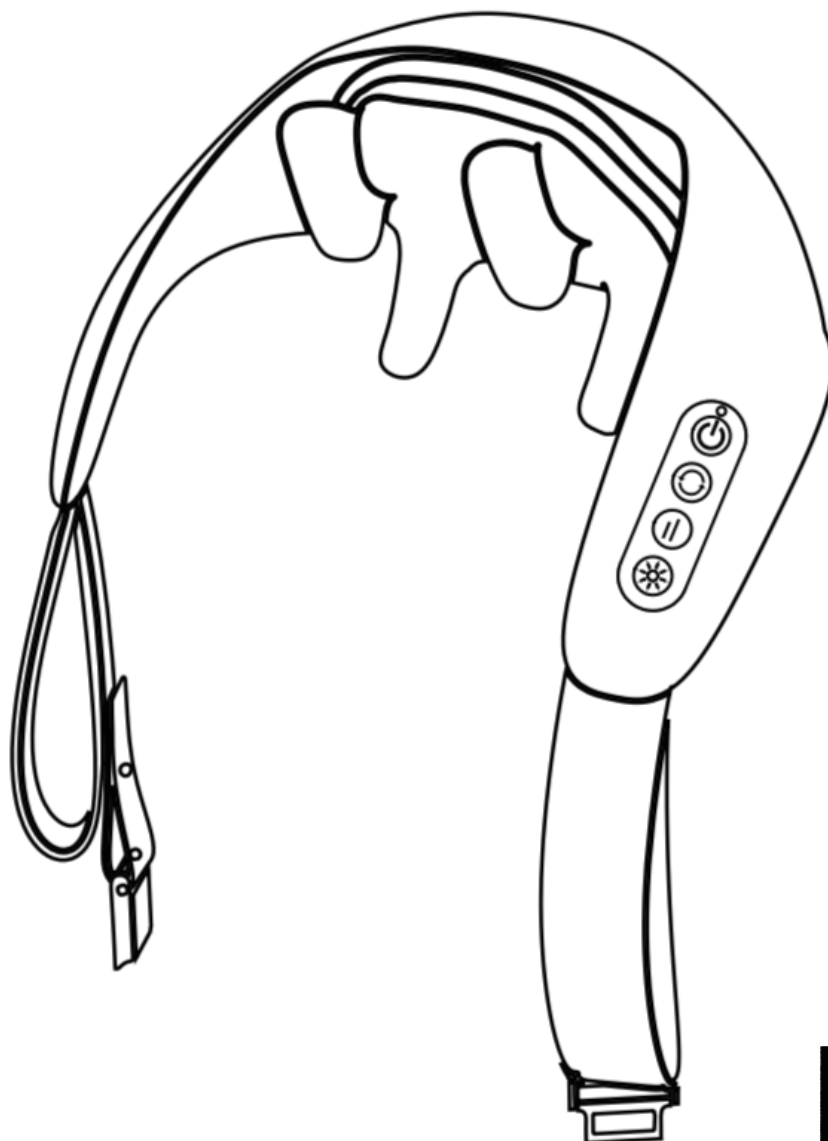

**EAC**

## Внимание

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.

Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

## Правила техники безопасности

### Важные указания по технике безопасности

- Для обеспечения безопасности и правильного использования устройства перед началом работы обязательно внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
- Используйте устройство только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
- После окончания работы или перед чисткой устройства отключите его от сети электропитания.
- Не накрывайте изделие, чтобы не допустить перегрева двигателя, который может привести к неисправности или повреждению.
- При использовании устройства вблизи детей, лиц с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также нетрудоспособных лиц необходимо обеспечить их безопасность и контроль со стороны ответственного лица.
- При появлении дискомфорта во время массажа немедленно прекратите его.
- Не используйте устройство в следующих случаях: повреждение шнура питания или штекера, неисправность, падение на пол или повреждение, попадание в воду. Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Не используйте запчасти, не рекомендованные производителем.
- Не вставляйте и не роняйте предметы в отверстия устройства.
- Данное устройство не предназначено для самодиагностики или самолечения. Для диагностики или лечения обращайтесь к квалифицированному медицинскому специалисту.
- Не рекомендуется использовать данное устройство лицам с физическими, умственными или чувствительными ограничениями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта и знаний (в том числе детям), за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и контролем ответственного лица.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Не используйте устройство в условиях высокой влажности или большого количества пыли, чтобы избежать его поломки.
- Не используйте устройство при температуре выше 40 °C.
- Не оставляйте устройство на улице.
- Не размещайте устройство рядом с электронагревателями, кухонными плитами или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

### Лица, которым не рекомендуется использовать данное устройство

- Если у вас имеется одно из следующих заболеваний, перед использованием проконсультируйтесь с врачом
- Лица, проходящие лечение у врача или испытывающие недомогание
- Лица, страдающие гипертонией, сердечными заболеваниями, атеросклерозом, тромбозом головного мозга
- Лица, страдающие злокачественными опухолями
- Беременные женщины и женщины в период менструации
- Лица, страдающие остеопорозом
- Лица, использующие кардиостимуляторы или имплантированные медицинские устройства
- Лица, страдающие острыми заболеваниями
- Несовершеннолетние
- С осторожностью использовать лицам, не чувствительным к теплу

### Меры предосторожности

- Не прикасайтесь к переключателям влажными руками.

- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на переключатели.


### **Инструкции по использованию штекера и шнура питания**

- Не вынимайте штекер из розетки мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током или повреждения механизма.
- Вынимая штекер из розетки, держите ее за корпус, не тяните за провод.
- После каждой зарядки обязательно отключайте устройство от сети.
- Провод питания должен находиться на безопасном расстоянии от нагревательных поверхностей.
- Не кладите провод питания под устройство или под тяжелые предметы.
- Не обматывайте шнур питания вокруг устройства, чтобы не повредить его и не вызвать поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте устройство, если шнур питания или штекер повреждены.
- Не используйте устройство, если штекер питания ослаблен.
- Не перемещайте устройство с помощью шнура питания и не используйте шнур питания в качестве ручки.
- При повреждении шнура питания обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному техническому специалисту для проверки и ремонта.

### **Внимание**


- Не наступайте на устройство и не кладите на него тяжелые предметы.
- Не ложитесь спать при включенном устройстве.
- Не используйте устройство в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.
- Не используйте устройство более 20 минут подряд.
- Не используйте устройство, если тканевый чехол поврежден.
- Не используйте устройство за час до и после приема пищи, чтобы избежать нежелательных последствий.
- При использовании устройства в условиях низкой температуры не следует резко включать функцию нагрева. Рекомендуется постепенно нагревать устройство до нормальной температуры.
- При перемещении устройства из места хранения с низкой температурой в теплое помещение, в результате скопления влаги внутри устройства может нарушиться его нормальная работа или даже произойти поломка. Рекомендуется после перемещения оставить устройство в помещении с нормальной температурой на 1 час, прежде чем начать его использование.
- При обнаружении каких-либо неисправностей или отклонений в работе устройства немедленно прекратите его использование.
- В случае прерывания электропитания во время использования устройства следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить травмирования пользователя в результате внезапного восстановления электропитания.
- Не используйте данное устройство во время грозы.

## Составные части

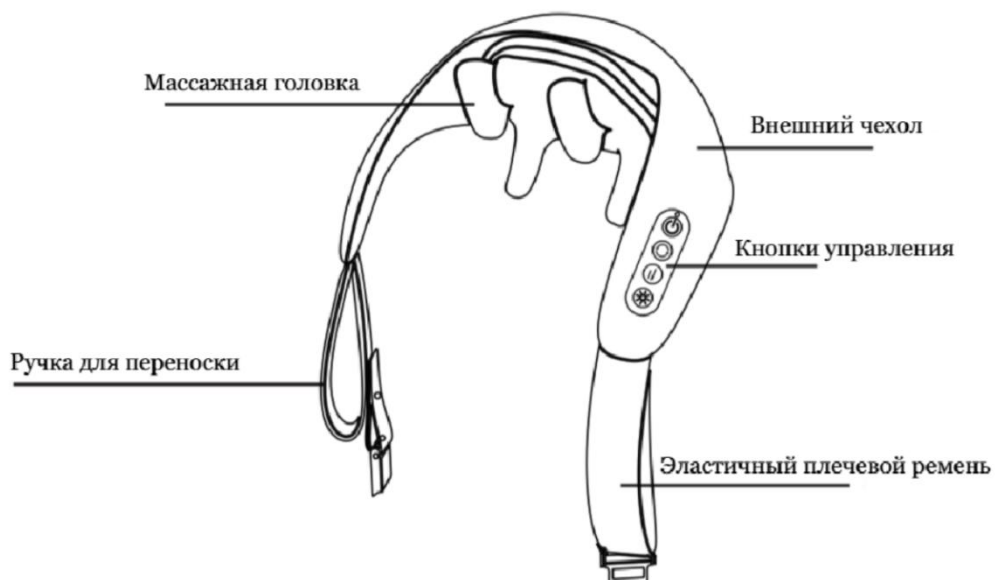

Напоминание: не включайте устройство во время зарядки.

## Кнопки управления

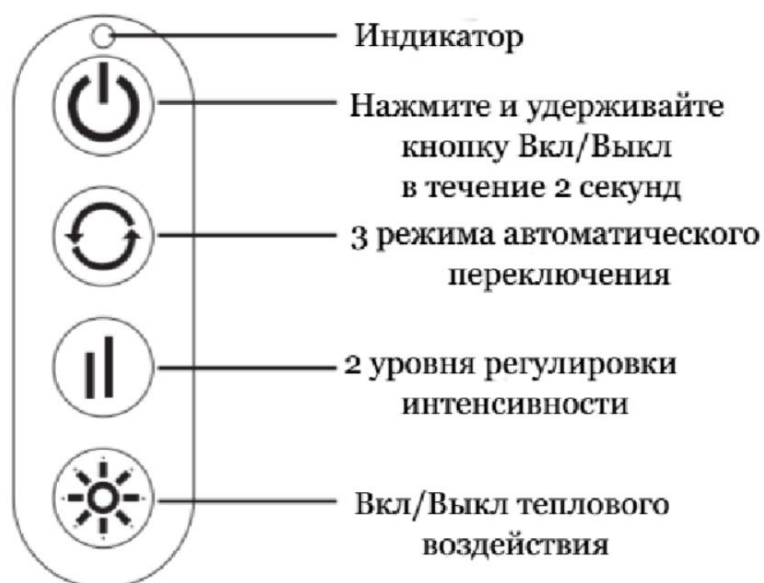

## **Инструкция по эксплуатации**

Кнопка питания: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить устройство, индикатор загорится красным цветом;

Кнопка режима: кнопка циклического переключения режимов, одно нажатие — красный индикатор, циклический массаж в прямом и обратном направлениях;  
одно нажатие — зеленый индикатор, массаж в прямом направлении;  
одно нажатие — синий индикатор, массаж в обратном направлении, и так далее.

Кнопка интенсивности: по умолчанию устройство включается в режиме максимальной интенсивности, одно нажатие — переключение в режим меньшей интенсивности, и так далее.

Кнопка нагрева: однократное нажатие включает кнопку нагрева, повторное нажатие выключает кнопку нагрева, цикл повторяется.

### **Выключение**

Автоматическое выключение: после 10 минут работы устройство автоматически выключается.

Ручное выключение: короткое нажатие выключает устройство.

## **Подготовка перед использованием**

- Храните данное устройство в сухом месте, не подвергайте длительному воздействию солнечных лучей.
- Проверьте устройство на наличие повреждений.

## **Инструкции по зарядке**

1. Для зарядки используйте зарядное устройство 5V=2A;
  2. Вставьте разъем Type-C в зарядный разъем на боковой стороне батарейного отсека;
  3. Вставьте штекер зарядного устройства в розетку 220V~, 50Hz (штекер в комплект не входит);
  4. Во время зарядки индикатор мигает красным и зеленым цветом, после полной зарядки горит зеленый индикатор;
  5. После завершения зарядки отключите устройство от источника питания.
- При низком заряде батареи устройство автоматически выключается.
  - Во время зарядки устройство нельзя включать.

## **Устранение неисправностей**

В случае возникновения неисправностей во время эксплуатации, пожалуйста, выполните следующие действия. Если неисправность не устраняется или устройство по-прежнему не работает должным образом, отключите питание и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. Не разбирайте устройство самостоятельно!

Основные неисправности	Причина	Основные методы устранения неисправностей
Невозможно включить	Низкий заряд аккумулятора	Заряжайте аккумулятор своевременно
Слабая сила массажа	Низкий заряд аккумулятора	Пожалуйста, своевременно заряжайте аккумулятор
Отсутствие теплового воздействия	Функция подогрева не включена	Пожалуйста, включите функцию подогрева

Если после проверки проблема не устранена, обратитесь к продавцу!

## Уход за устройством

### а) Хранение

Когда устройство не используется, поместите его в упаковочную коробку и храните в безопасном, сухом, проветриваемом и защищенном от попадания солнечных лучей месте.

- Не перегибайте шнур питания.
- Не подвешивайте устройство за шнур питания.
- Не допускайте попадания острых предметов на поверхность устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.

### б ) Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено и штекер шнура питания вынута из розетки.
- Для чистки устройства и кнопок используйте сухую ткань.
- Во время чистки не снимайте чехол с устройства.
- После чистки оставьте устройство для естественной сушки.

### \* Примечание

- Не используйте для очистки устройства агрессивные чистящие средства, такие как чистящие средства для посуды или растворители.
- Не очищайте кнопки влажной тканью, чтобы избежать неисправности.

### с) Уход

- Держите устройство в чистоте и не подвергайте его воздействию высокой влажности.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, накройте его пылезащитным чехлом (приобретается отдельно), чтобы предотвратить попадание пыли.

## Технические характеристики

Название устройства	Интеллектуальный массажер для шеи и плеч
Модель	L-OMA36
Номинальное напряжение	5 В
Номинальная входная мощность	8 Вт
Входной заряд	5 В, 2 А
Время работы	120 минут
Первоначальное время массажа	10 минут
Стандарты	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

## Наименование и содержание вредных веществ в устройстве

	Вредные вещества					
Название детали	Свинец Pb	Ртуть Hg	Кадмий Cd	Шестивалентный хром Cr (VI)	Полибромированные бифенилы PBB	Полибромированные дифениловые эфиры PBDE
Внешний проход	0	0	0	0	0	0
Компоненты печатных плат	x	0	0	0	0	0
Источник питания	0	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	0	0	0	0	0	0
Батарея	x	0	0	0	0	0
Нагревательный элемент	0	0	0	0	0	0
Двигатель	0	0	0	0	0	0

Настоящая таблица составлена в соответствии с требованиями стандарта SJ/T11364-2014.

0: означает, что содержание данного вредного вещества во всех однородных материалах данной детали не превышает предельно допустимые значения, установленные стандартом GB/T26572.

X: означает, что содержание данного вредного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов данной детали превышает предельно допустимые значения, установленные стандартом GB/T26572.

«Срок экологической эксплуатации» данного устройства обозначен значком, показанным на рисунке внизу справа. Он основан на «Методах управления ограничением использования вредных веществ в электротехнических и электронных изделиях», опубликованных 1 июля 2016 года, и «Руководящих принципах по экологически безопасному сроку использования бытовых электроприборов» Китайской ассоциации бытовой электротехники, в соответствии с требованиями «Методики», производители и импортеры продукции должны раскрывать информацию о содержании в продукции вредных веществ в соответствии с требованиями и форматом соответствующих сопутствующих стандартов, а также указывать срок экологического использования продукции.



При соблюдении указаний по безопасности и эксплуатации, приведенных в инструкции по эксплуатации, а также при отсутствии других законных оснований для освобождения от ответственности, в течение вышеуказанного срока с даты производства токсичные вредные вещества или элементы не выделяются и не мутируют, а использование продукта не приводит к серьезному загрязнению окружающей среды или причинению серьезного вреда здоровью и имуществу пользователя.

«Срок экологической безопасности» не является сроком безопасности использования и, в частности, отличается от срока использования, ограниченного факторами безопасности электрических характеристик, электромагнитной безопасности и т. д.

После надлежащего использования устройство следует утилизировать в соответствии с законами и правилами, касающимися утилизации и повторного использования электронных информационных устройств

Примечание: этот срок является “сроком экологической эксплуатации”, а не сроком гарантии качества устройства.

Меры предосторожности при утилизации устройства

- Перед утилизацией аккумуляторные батареи должны быть извлечены в соответствии с требованиями законодательства.
- При извлечении аккумуляторных батарей необходимо отключить питание от устройства.
- Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями законодательства.



Лицам, не являющимся специалистами, запрещается самостоятельно демонтировать устройство!


Порядок извлечения батареи:

1. Отключите внешний источник питания, снимите корпус устройства;
2. Отключите питание от батареи;
3. Снимите батарею;
4. Отработанные батареи следует сдавать в специальные пункты сбора.



5. Пожалуйста, соблюдайте местные законы об охране окружающей среды и правила утилизации отходов, бережно относитесь к окружающей среде.

### Описание значков стирки

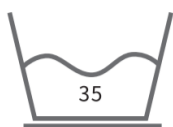

Максимальная температура стирки 35 °C



Не подвергать сушке в сушильной машине



Не отбеливать



Не подвергать химической чистке



Гладить при низкой температуре